

1 Page d'accueil



**Mediadent manuel
d'utilisation V8
Partie 2 : D.F.O.**

Table des Matières

| | | |
|-------|---|-------|
| 1. | Page d'accueil | 1 |
| 2. | Page d'accueil | 4-6 |
| 3. | Informations utilisateur | 7 |
| 3.1. | Configuration minimale requise | 7 |
| 3.2. | Informations importantes pour l'utilisateur | 8-9 |
| 4. | Manuel d'utilisation D.F.O. | 10 |
| 4.1. | Menu principal | 10 |
| 4.2. | Fichier | 10 |
| 4.3. | Effacer l'analyse | 10 |
| 4.4. | Charger l'analyse | 10-11 |
| 4.5. | Sauvegarde l'analyse | 11-12 |
| 4.6. | Analyse | 12 |
| 4.7. | Imprimer | 13 |
| 4.8. | Options | 13-14 |
| 4.9. | Calibrer | 14-15 |
| 4.10. | Bureau | 15 |
| 4.11. | Langue | 15-16 |
| 4.12. | Configuration | 16 |
| 4.13. | Couleurs | 16-17 |
| 4.14. | Filtres | 17-18 |
| 4.15. | Divers | 18-19 |
| 4.16. | Éditeur de points de repère | 19-20 |
| 4.17. | Entretien | 20 |
| 4.18. | Affichage | 20-21 |
| 4.19. | Aide | 21-22 |
| 4.20. | Enregistrement | 22 |
| 4.21. | Fenêtre de contrôle | 22 |
| 4.22. | Tracé | 22-24 |
| 4.23. | Orientation | 24 |
| 4.24. | Modification | 24-25 |

| | |
|----------------------------|-------|
| 4.25. Superposition | 25-27 |
| 4.26. Icônes | 27 |
| 4.27. Montrer Rayons X | 27 |
| 4.28. Montrer Analyse | 27-28 |
| 4.29. Montrer Tuteur | 28 |
| 4.30. Montrer Résultats | 28 |
| 4.31. Plus nette | 28-29 |
| 4.32. Réduction du bruit | 29-30 |
| 4.33. Information patient | 30-31 |
| 4.34. Recharger Rayons X | 31 |
| 4.35. Quitter le programme | 31 |
| 4.36. Loupe | 31-32 |
| 4.37. Fenêtre Tuteur | 32-35 |
| 4.38. Barre d'outils | 35 |
| 4.39. Luminosité | 35 |
| 4.40. Contraste | 35 |
| 4.41. Pseudo-Couleurs | 35 |
| 4.42. Fenêtrage | 35-36 |
| 5. Identification | 37 |

2 D.F.O.

Mediadent Manuel partie 2 D.F.O.

Copyright 2004-2021 ImageLevel - Tous droits réservés

Utilisation prévue :

Mediadent est un logiciel d'imagerie destiné aux professionnels de la médecine dentaire et maxillo-faciale, c'est-à-dire aux dentistes, orthodontistes et assistants dentaires agréés. Mediadent permet de visualiser, de traiter et de sauvegarder des images numériques ou numérisées acquises à l'aide de dispositifs d'imagerie dentaire. Avec Mediadent, les images peuvent être envoyées vers différents systèmes d'archivage et de communication.

Le logiciel Mediadent doit être utilisé sur un ordinateur équipé d'un système d'exploitation Windows dans le cabinet dentaire ou dans l'espace de travail du dentiste (bureau).

Mediadent propose divers outils de traitement d'images numériques pour améliorer la qualité et la valeur diagnostique des images 2D et 3D acquises. Il permet à l'utilisateur d'agrandir/réduire les images, d'appliquer des filtres prédéfinis tels que la netteté et le contraste des images et d'effectuer des mesures sur les images. Le module Dental Facial Orthopedics (D.F.O.) permet à l'orthodontiste et au chirurgien maxillo-facial d'effectuer une analyse céphalo automatisée.

Mediadent vise à faciliter l'interprétation des images en fournissant à l'utilisateur une vue claire et améliorée de la santé dentaire du patient et à soutenir ensuite le diagnostic, la planification du traitement et le suivi.

Risque résiduel :

Corilus souhaite attirer l'attention sur les risques résiduels suivants liés à l'utilisation de Mediadent :

1. Les bugs logiciels sont inhérents à tout système logiciel, tel que Mediadent. Corilus a mis en place des processus pour prévenir, identifier et résoudre les bugs connus en temps voulu. Malgré ces efforts, le risque d'un bug inconnu dans Mediadent, qui pourrait potentiellement conduire à un traitement erroné des informations ou à un affichage incorrect, est néanmoins intrinsèquement présent.
2. Corilus attache la plus grande importance à la sécurité des informations et à la protection des données pour ses produits et services connexes. Néanmoins, la cybersécurité est une responsabilité conjointe entre Corilus et les utilisateurs du logiciel et un incident de sécurité reste toujours un risque potentiel dans un environnement connecté. En tant qu'utilisateur de Mediadent, nous vous conseillons donc vivement de protéger vos postes de travail en maintenant votre système d'exploitation et vos SDK/pilotes à jour et en installant un pare-feu et un logiciel de protection des points de terminaison (par exemple un antivirus).
3. Mediadent repose sur une utilisation correcte par l'utilisateur. Pour aider à une utilisation correcte, une liste d'exigences minimales (faisant partie de ce manuel d'utilisation), des matériaux de formation et une documentation d'utilisation concernant Mediadent sont disponibles et mis à jour régulièrement par Corilus et ses distributeurs. Néanmoins, une erreur humaine lors de l'utilisation de Mediadent ne peut être exclue et pourrait éventuellement conduire à des résultats erronés.
4. L'utilisateur reste responsable de la maintenance et de la configuration du matériel d'imagerie dentaire. Les erreurs directement associées à un matériel d'imagerie dentaire défectueux peuvent entraîner un risque dans le logiciel Mediadent (par exemple, l'image source arrivant dans Mediadent est mal calibrée). Mediadent ne peut être tenu responsable de tout dysfonctionnement des appareils avec lesquels il s'interface ou de toute image erronée (par exemple, mal calibrée) qui est envoyée à Mediadent.
5. Corilus souhaite fournir un logiciel d'imagerie à la pointe de la technologie et un service et une assistance de premier ordre. C'est pourquoi nous avons mis en place et maintenons un système de gestion de la qualité efficace, basé sur la norme ISO-13485. Même si nous améliorons continuellement nos processus de qualité, il y a toujours une petite chance qu'une erreur se produise, ce qui pourrait avoir un impact sur les performances ou la sécurité du produit. Dans ce cas, nous demandons à l'utilisateur de contacter Corilus au plus vite (via le distributeur, le cas échéant) afin que nous puissions identifier la cause profonde et prendre les mesures correctives et préventives nécessaires.

Tous les risques identifiés sont réduits au maximum et aucun de ces risques résiduels n'est jugé inacceptable. Des effets secondaires indésirables et des contre-indications à l'utilisation de Mediadent n'ont pas été identifiés.

Bénéfice clinique :

Mediadent offre une large gamme d'outils de pointe pour l'amélioration, le traitement et la mesure des images, afin d'avoir un impact positif sur la prise en charge des patients en favorisant un diagnostic précis, la planification du traitement et le suivi.

Considérations particulières :

Le logiciel d'imagerie Mediadent est toujours intégré dans un système de **gestion des patients (PMS)**.

Tous les systèmes de gestion des patients compatibles avec l'utilisation de l'interface OLE sont considérés comme compatibles s'ils mettent correctement en œuvre les spécifications de la documentation « Intégration Mediadent ».









L'utilisation de l'interface en ligne de commande n'est plus prise en charge officiellement, mais nous apportons notre assistance dans la mesure du possible pour des raisons de rétrocompatibilité. Veuillez contacter votre revendeur si vous avez des questions sur ce type d'interface.

Vous pourrez lancer Mediadent via le système PMS en cliquant sur l'icône Mediadent.

La liste des appareils d'imagerie matériels compatibles se trouve sur notre site web www.imagelevel.com. Si vous avez des questions sur la compatibilité, veuillez contacter votre revendeur.

Le logiciel D.F.O. est un module optionnel de Mediadent. Si vous souhaitez utiliser D.F.O., veuillez contacter votre revendeur local.

Symboles utilisés dans ce document et sur l'étiquette

| Symbole | Titre | Description |
|---|--|--|
|  | Fabricant | Indique le nom et l'adresse du fabricant. |
|  | Date de fabrication | Indique la date de fabrication du produit, exprimée par deux chiffres pour le mois (« MM ») et quatre chiffres pour l'année (« AAAA »). Pour les logiciels, cela représente la date de mise en production. |
|  | Consultez le mode d'emploi | Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi. Le manuel d'utilisation (mode d'emploi) est fourni en format électronique. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation dans la section Aide du logiciel Mediadent, via le menu Aide ou en appuyant sur la touche de raccourci « F1 ». Vous pouvez également télécharger une copie PDF via www.imagelevel.com ou demander gratuitement un exemplaire papier en contactant notre service d'assistance à la clientèle. Les manuels papier seront livrés au plus tard dans les 7 jours. |
|  | Marquage CE | Les lettres « CE » apparaissent sur de nombreux produits commercialisés sur le marché unique étendu de l'Espace économique européen (EEE). Elles signifient que les produits vendus dans l'EEE ont été évalués pour répondre à des exigences élevées en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement. |
|  | Dispositif médical | Indique que l'article est un dispositif médical. |
|  | Identifiant unique du dispositif | Indique un support qui contient des informations sur l'identifiant unique du dispositif (« UDI »). |
|  | Reportez-vous au manuel d'instruction/à la brochure | Signifie que le manuel/la brochure d'instructions doit être lu(e). |
|  | Attention | Indique qu'il faut être prudent lorsqu'on utilise l'appareil ou la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé. Indique que la situation actuelle nécessite une attention particulière ou une action de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables. Sur le label de qualité de l'appli santé : pour indiquer que l'approbation d'un professionnel de santé est |

nécessaire pour utiliser l'appli santé.

3 Informations utilisateur

3.1 Configuration minimale requise

- Système d'exploitation :
 - Microsoft Windows 8.1 ou supérieur
 - Dernières informations sur les versions d'OS supportées : <https://support.microsoft.com/nl-be/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet>
- CPU :
 - Processeur double cœur ou supérieur.
- Mémoire principale :
 - Mémoire interne de 4 Go de RAM ou plus
- Graphiques :
 - Pour l'imagerie 2D :
 - Carte graphique intégrée ou dédiée
 - Résolution : 1024x768 ou plus
 - Mémoire : 256MB
 - Pour la visionneuse 3D :
 - Carte graphique dédiée
 - Résolution : 1024x768 ou UHD ou HD
 - Mémoire : 4GB
 - Pour la capture d'images CT :
 - Cela dépend du matériel utilisé.
 - Carte graphique dédiée
 - Résolution : 1024x768 ou UHD ou HD
 - Mémoire : 4GB
 - Certains appareils ont besoin du support NVIDIA CUDA (<https://developer.nvidia.com/cuda-zone>)
- Ports USB :
 - 1 port USB1.1 libre (ou supérieur) pour la clé de licence (installation pour un seul utilisateur)
 - 1 port USB2.0 libre (ou supérieur) pour les périphériques de capture USB.
- Stockage :
 - Type : SSD (Solid State Drive) recommandé. (rapide)
 - Taille : Minimum 512 GB
 - L'utilisateur doit avoir les pleins droits sur le répertoire du programme et des données.
- Adaptateur réseau :
 - Pilote Windows disponible pour le système d'exploitation installé.
 - 10/100/1000 Mbps
 - Connecteur RJ-45
 - Connexion réseau solide.
 - Certains appareils à rayons X nécessitent une carte réseau dédiée supplémentaire.
- Partage de données en réseau :
 - notification de changement de fichier pour rafraîchir correctement la bibliothèque des images et le status.
 - Windows : SMBv2 ou supérieur
 - NAS / Linux : Samba 2.0 ou supérieur (smb.conf | Défaut : changer la notification = oui)
 - L'utilisateur doit avoir des droits de lecture/écriture sur le partage de données.
- Logiciel
 - PDF pour accéder au mode d'emploi électronique (« Manuel d'utilisation ») ou à la visionneuse d'aide intégrée de Windows.

3.2 Informations importantes pour l'utilisateur



Mises en garde et précautions :

- Les utilisateurs de Mediadent doivent être des praticiens de la santé dentaire qualifiés pour effectuer et interpréter l'imagerie dentaire.
- Une formation d'introduction à l'utilisation du logiciel Mediadent est fournie par votre revendeur au cours du processus d'installation. Les utilisateurs bénéficient également d'un accès à l'ensemble de la documentation, disponible à l'adresse suivante www.imagelevel.com. En cas de questions supplémentaires concernant l'utilisation, l'utilisateur est invité à contacter le revendeur pour obtenir de l'aide ou à demander qu'une formation officielle soit programmée.
- Ce logiciel est uniquement une aide au diagnostic. Vous devez faire appel à votre formation et à votre jugement professionnels avant de décider d'un traitement.
- Les installations ne peuvent avoir lieu que dans des environnements qui remplissent la **configuration minimale requise (Section 3.1)**. L'utilisateur est responsable de l'infrastructure de soutien (par exemple, la maintenance des ordinateurs, la connectivité du réseau, l'alimentation électrique) et de sa stabilité.
- La **configuration minimale requise (Section 3.1)** informe l'utilisateur que l'utilisation de la virtualisation n'est pas officiellement prise en charge. Veuillez contacter votre revendeur si vous avez des questions sur l'utilisation de la virtualisation.
- Les images radiographiques ne sont pas destinées à un usage diagnostique lorsqu'elles sont visualisées sur des écrans ou des moniteurs qui ne répondent pas aux **spécifications minimales du système (Section 3.1)**.
- Tous les appareils connectés doivent être présents sur la liste de compatibilité (voir notre www.imagelevel.com pour un aperçu complet) pour être officiellement pris en charge.
- L'utilisateur reste responsable de la vérification de la qualité des images et des métadonnées associées lors de l'utilisation du logiciel Mediadent et lors de l'importation et de l'exportation à partir de Mediadent.
- Il est recommandé d'effectuer des mesures ou des dessins uniquement sur des images calibrées. Pour effectuer cette opération sur une image sans information de calibrage, il faut utiliser un segment de référence de longueur connue.
- Les annotations et les mesures effectuées dans le logiciel sont sous votre propre responsabilité. Une image radiographique est une image bidimensionnelle d'un objet tridimensionnel, et les mesures peuvent être sujettes à des erreurs. Les mesures sont uniquement informatives et les opérations nécessitant un positionnement précis sur le patient sont sous votre propre responsabilité.
- Les images panoramiques ou OPG, de par leur nature, contiennent des distorsions dues au grossissement à la fois vertical et horizontal. Tout calibrage de ces types d'images doit être considéré comme un guide approximatif qui ne s'applique qu'au voisinage immédiat du calibrage. L'insertion d'objets de longueur prédéterminée tels que des simulateurs d'implants fournit des informations approximatives.
- Les informations relatives à l'orientation du patient ne sont pas fournies

pour les images intrabuccales, les images de radiographie informatisée (CR), les images céphalométriques obliques ou les images en couleur. L'orientation de ces images dépend de la manipulation de l'utilisateur et du positionnement du patient.

Incidents graves :

Veillez signaler sans délai tout incident relatif au logiciel Mediadent à votre revendeur. Votre revendeur fera le nécessaire pour remplir ses obligations légales et contractuelles et pour contribuer à atténuer l'incident dans les meilleurs délais.

Vous pouvez également contacter l'autorité locale compétente pour faire preuve de vigilance. Pour l'UE, la liste des coordonnées est disponible sur son site web.

Ce tableau fournit une indication de la performance de mesure de Mediadent. Les variations observées lors de ces mesures peuvent ne pas refléter réellement la variance potentielle des mesures dentaires réelles dans la pratique clinique, qui peuvent être plus difficiles à réaliser.

Il est recommandé de calibrer le capteur à l'aide des algorithmes de calibrage standard afin de maintenir la cohérence des mesures.

| | Mediadent performance de mesure | | |
|---|--|---------------------------|---|
| Référence : longueur réelle de l'objet (en mm) | Moyenne mesurée (en mm) | Écart-type (en mm) | Intervalle de confiance à 95 % (en mm) |
| Objet de test 1 : 10.000 | 10.004 | 0.018 | 10.000 +- 0.016 |
| Objet de test 2 : 20.000 | 20.022 | 0.029 | 20.000 +- 0.026 |

4 Manuel d'utilisation D.F.O.

4.1 Menu principal

Menu principal

File Analysis Print Options View

Fichier (Section 4.2)

Analyse (Section 4.6)

Impression (Section 4.7)

Options (Section 4.8)

Aperçu (Section 4.18)

4.2 Fichier

Fichier

Clear Analysis

Load Analysis

Save Analysis

Analyse Editor

Exit Program

Effacer l'analyse (Section 4.3)

Charger l'analyse (Section 4.4)

Sauvegarder l'analyse (Section 4.5)

Rédacteur d'analyse :Module optionnel

Quitter le programme (Section 4.35)

4.3 Effacer l'analyse

Effacer l'analyse




En cliquant sur cette icône, tous les points (modèles, analyses, etc.) seront supprimés de l'image active. Cette fonction vous permet de relancer une analyse sur l'image active

4.4 Charger l'analyse

Charger l'analyse



Cette fonction vous permet de charger une analyse sauvegardée antérieurement, effectuée sur l'image active. En cliquant sur l'icône, la fenêtre suivante s'ouvre :

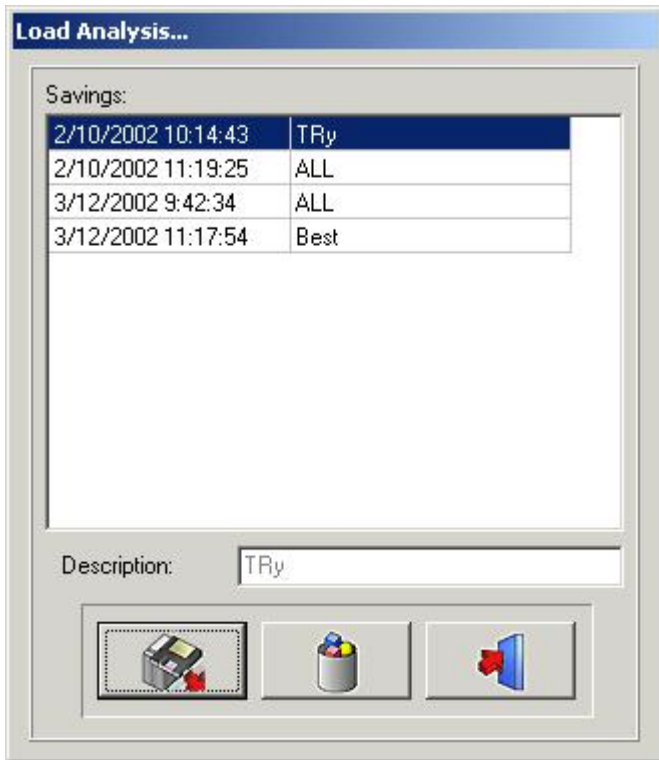

En cliquant sur le nom sélectionné puis sur l'icône Charger, ou en double-cliquant sur le nom sélectionné, l'analyse choisie sera chargée.

L'analyse peut être supprimée en cliquant sur le nom sélectionné, puis en cliquant sur l'icône de suppression.

4.5 Sauvegarde l'analyse


Sauvegarder l'analyse



Cette fonction vous permet de stocker, ou de restocker, toute analyse, qu'elle soit finie ou non, sur l'image activée, après modification.

Tous les points sont stockés avec l'image.

En cliquant sur l'icône Sauvegarder l'analyse, la fenêtre suivante s'ouvre :

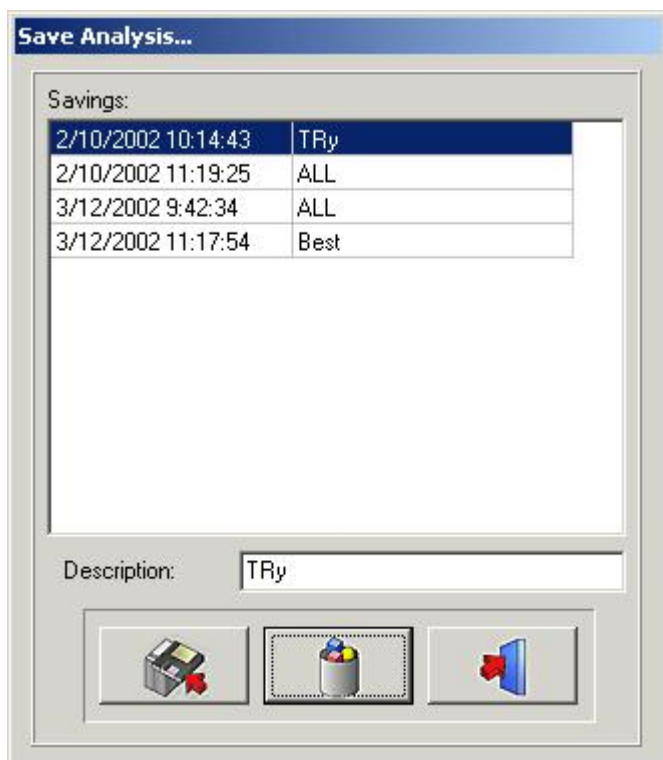

Pour sauvegarder l'analyse, vous pouvez utiliser un nom existant, en cliquant simplement sur l'un des noms de la liste, ou vous pouvez taper un nouveau nom dans la case de description, puis cliquer sur l'*icône Sauvegarder*. Les analyses enregistrées précédemment ne peuvent pas être écrasées, même si vous utilisez le même nom. L'analyse peut être supprimée en cliquant sur le nom sélectionné, puis en cliquant sur l'*icône de suppression*.

4.6 Analyse

Analyse



Toutes les analyses céphalométriques standard, vos analyses optionnelles et vos analyses personnalisées (Rédacteur) sont présentées dans ce menu.

Vous pouvez sélectionner toutes les analyses que vous souhaitez utiliser, en cliquant simplement dessus.

Tout sélectionner : Si vous voulez utiliser toutes les analyses, vous pouvez cliquer sur **Tout sélectionner**.

Annuler sélection : En cliquant sur **Annuler sélection**, toutes les analyses seront décochées.

Remarque : D.F.O. vous demandera de paramétrer **tous** les points nécessaires pour **toutes** vos analyses sélectionnées !

Ainsi, pour réduire votre temps d'analyse, il est recommandé de désélectionner les analyses que vous n'utiliserez pas.

4.7 Imprimer

Impression


Analysis
RX

Dans ce menu d'impression, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez imprimer.

Analyse
Rayons X

Analyse

Si vous sélectionnez *Analyse*, la fenêtre suivante s'ouvre :

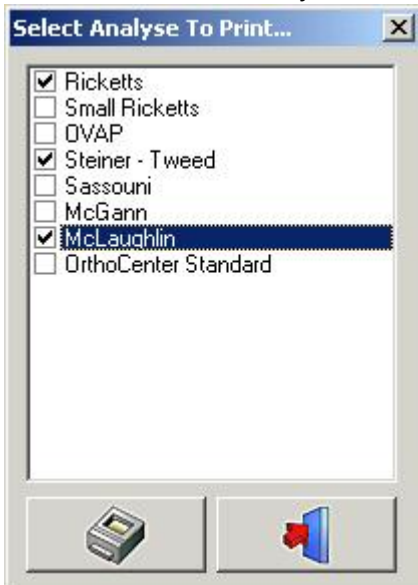

Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir les analyses, qui sont sélectionnées dans le menu des analyses, que vous souhaitez imprimer, en cliquant simplement sur leur nom.

Il est possible de sélectionner plusieurs analyses.

Lorsque vous cliquez sur l'*icône* Impression, toutes les analyses sélectionnées seront imprimées en une seule fois.

Rayons X

Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir les analyses que vous souhaitez imprimer, en cliquant simplement sur leur nom.

Il est possible de sélectionner plusieurs analyses.

Lorsque vous cliquez sur l'*impression* Impression, toutes les analyses sélectionnées seront imprimées en une seule fois.

Rayons X

Si vous sélectionnez *Rayons X*, le céphalo sera imprimé dans un format « Ajusté à la page ».

L'image sera imprimée telle qu'elle apparaît sur votre bureau :

Rayons X + Tracé
Rayons X sans tracé
Tracé sans rayons X
Vierge

4.8 Options

Options



Calibrer (Section 4.9)

Bureau (Section 4.10)

Langue (Section 4.11)


Configuration (Section 4.12)

4.9 Calibrer

Calibrer



La fonction de calibrage vous permet de calibrer votre image.
En cliquant sur l'icône Calibrer, la fenêtre suivante s'ouvre :

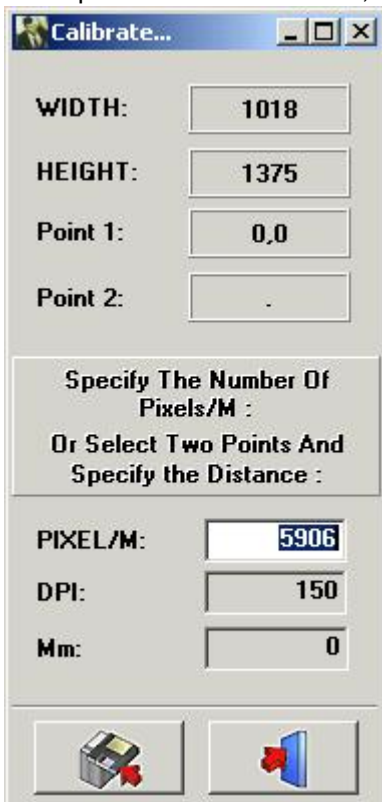

Il y a 3 façons de calibrer votre image

I. PIXEL/M : Cela peut être utilisé si les valeurs sont connues pour le système utilisé.

II. PPP : Point par pouce.

Cela peut être utilisé si les valeurs sont connues pour le système utilisé.

III. Distance entre 2 points : Si aucune valeur de calibrage n'est connue, vous pouvez calibrer votre image en mesurant un sujet bien connu dans l'image, ou un objet préalablement fixé sur une image.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris dans la petite « fenêtre mm ». La fenêtre sera marquée en blanc.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le premier point connu. Maintenant, lorsque vous déplacez le curseur, une fine ligne blanche, qui représente la distance, apparaît. Lorsque vous cliquez une seconde fois, sur


un point bien connu, la distance, sera surveillée dans la « fenêtre mm ». Cette valeur peut être modifiée.

Lorsque vous enregistrez cette valeur, l'image sera recalibrée.

Les images acquises, avec des capteurs originaux connus, ou les dimensions de la plaque de phosphore, sont automatiquement calibrées.

4.10 Bureau


Bureau :

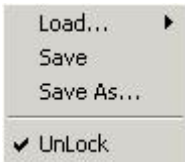

Ce menu peut être utilisé pour modifier votre bureau.

Chargement... :

Lorsque vous déplacez le curseur sur *Chargement...* la fenêtre pop-up suivante apparaît :

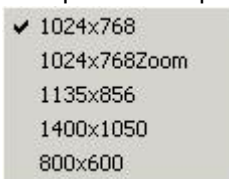


Dans cette fenêtre, les noms de tous les bureaux standard, ainsi que ceux des bureaux que vous avez créés, apparaissent.

Vous pouvez sélectionner chaque bureau, en cliquant simplement sur son nom.

Sauvegarder : En cliquant sur *sauvegarder*, vous enregistrerez l'édition, ou le nouveau bureau, dans le répertoire du programme.

Sauvegarder sous ... : En cliquant sur *Sauvegarder sous...* vous verrez apparaître la fenêtre pop-up suivante :

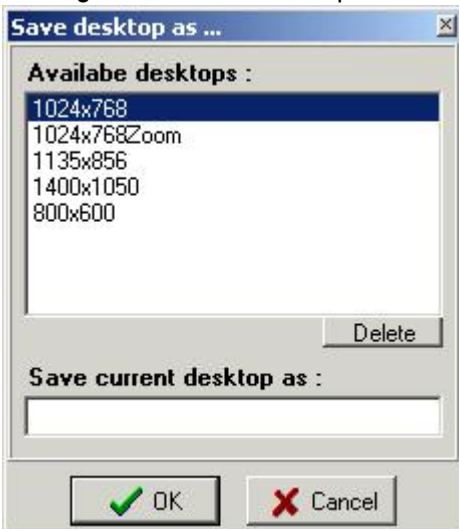

Un nouveau nom de bureau est demandé.

Le bureau modifié sera sauvegardé comme un nouveau bureau dans le répertoire du programme.

Déverrouiller : Lorsque le déverrouillage n'est pas coché, il est impossible de déplacer ou de remodeler les fenêtres et les barres d'outils.

4.11 Langue

Langue

Lorsque vous déplacez le curseur sur Langue, la fenêtre pop-up suivante apparaît :



La langue de D.F.O. peut être facilement changée, en cliquant simplement sur le nom de la langue.

4.12 Configuration

Configuration

Ce menu est divisé en 5 fenêtres à onglets

Couleurs (Section 4.13)

Filtres/Imprimantes (Section 4.14)


Divers (Section 4.15)

Éditeur de points de repère (Section 4.16)

Service (Section 4.17)

4.13 Couleurs

Couleurs

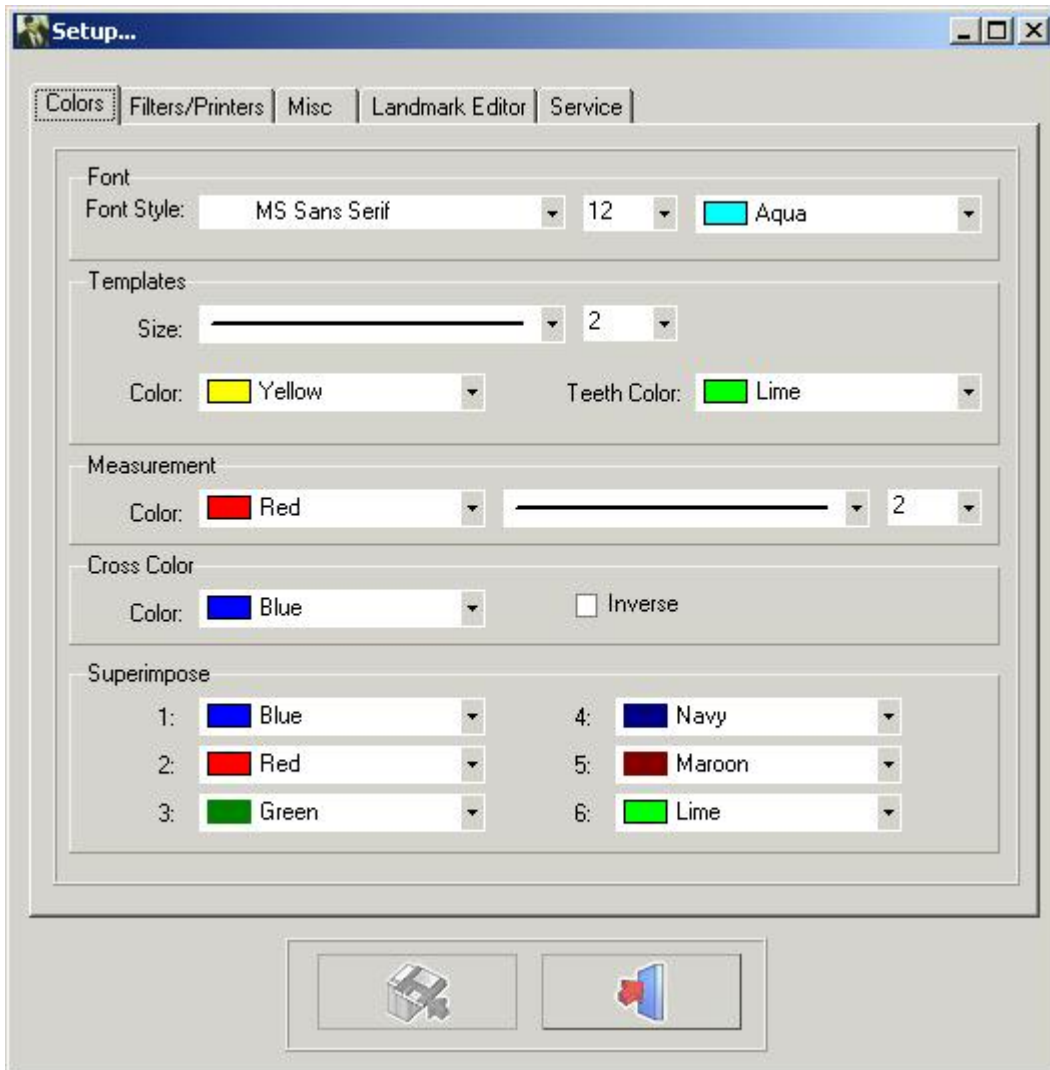

Dans l'onglet couleurs, tous les dessins et les mesures peuvent être modifiés selon vos propres paramètres.
Police : Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier la police, la taille de la police et la couleur de la police des points de repère.

Modèles : Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier la taille et les couleurs des modèles.
 La couleur des dents peut être ajustée séparément.

Mesures : Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier la taille et la couleur des mesures.

Couleur de la croix : Dans cette fenêtre, vous pouvez changer la couleur de la croix de la loupe
 Il est également possible de sélectionner l'option inversée. Lorsque l'option inversée est sélectionnée, la croix apparaît toujours dans l'ordre inverse de son arrière-plan.


Superposer : Dans cette fenêtre, les couleurs des différents tracés chargés en superposition peuvent être modifiées.

Remarque : Les modifications peuvent être enregistrées en cliquant sur le bouton sauvegarder.

Si les modifications ne sont pas sauvegardées, elles ne seront pas mémorisées lors du redémarrage de D.F.O..

4.14 Filtres

Filtres/Imprimantes

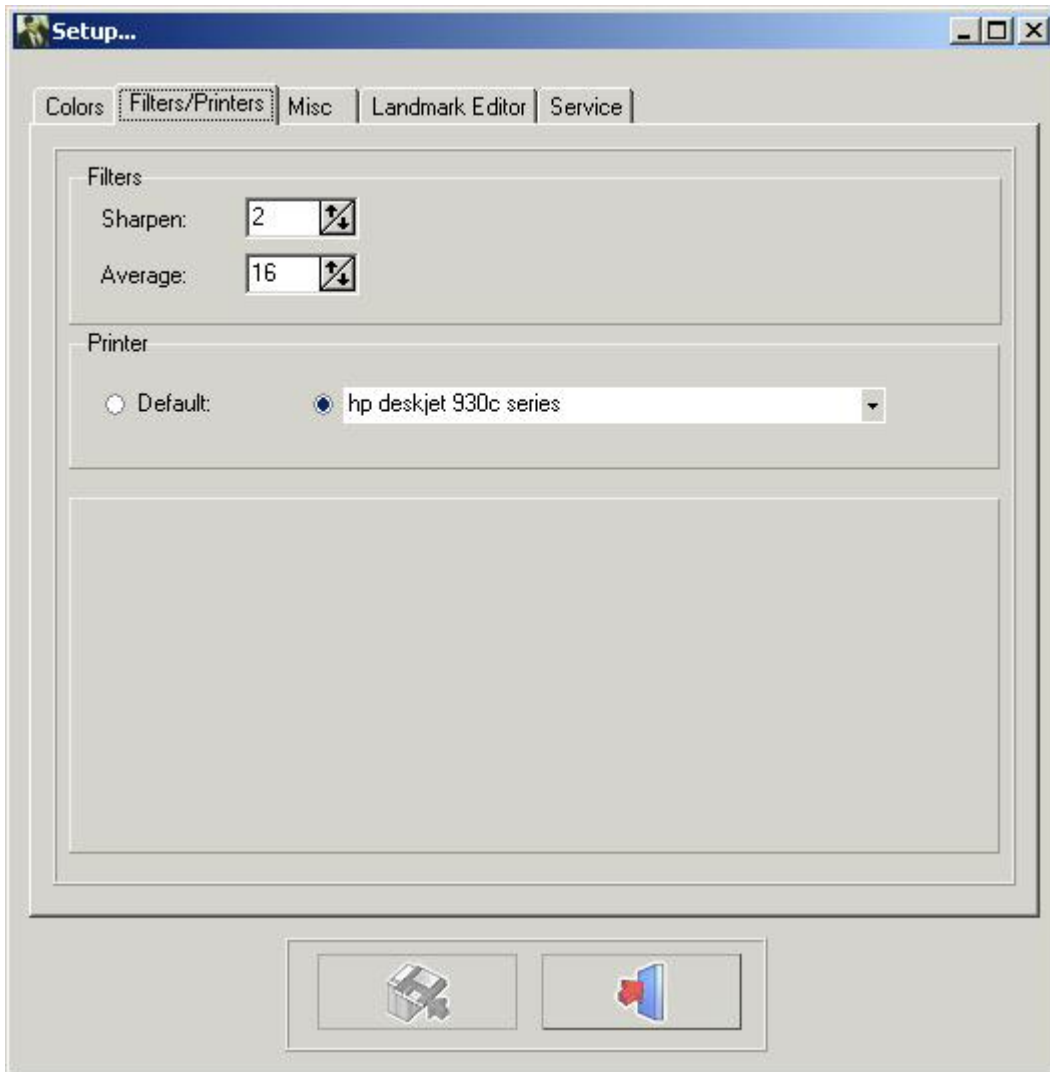

Filtres : Dans cette fenêtre, le poids des filtres correspondants peut être ajusté.

Plus nette (Section 4.31)

Lisser (Section 4.32)

Imprimantes : Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans D.F.O..

Remarque : Les modifications peuvent être enregistrées en cliquant sur le bouton Sauvegarder.

Si les modifications ne sont pas sauvegardées, elles ne seront pas mémorisées lors du redémarrage de D.F.O..


4.15 Divers

Divers

Visualisation

Automatisation

Valeur de calibrage par défaut

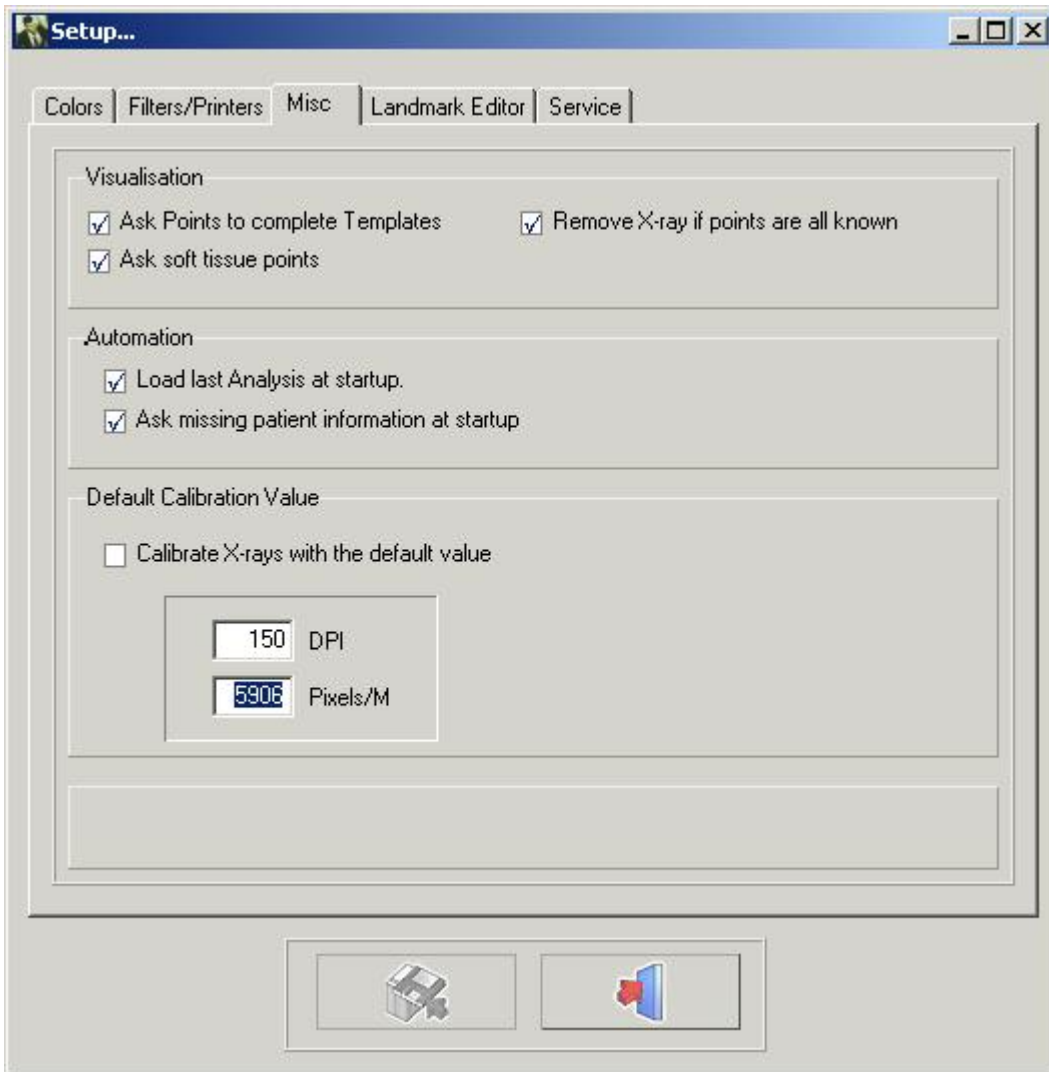

Visualisation

Lorsque l'option « Demander des points pour compléter les modèles » n'est pas cochée, D.F.O. ne vous demandera pas les points supplémentaires nécessaires pour le dessin des modèles.

Lorsque l'option « Demander les points des tissus mous » n'est pas cochée, D.F.O. ne vous demandera pas les points supplémentaires nécessaires pour le dessin des tissus mous.

Lorsque l'option « Supprimer la radiographie si tous les points sont connus » est sélectionnée, D.F.O. supprime automatiquement la radiographie lorsque tous les points nécessaires aux analyses sélectionnées sont définis.

Automatisation

Lorsque l'option « Charger la dernière analyse au démarrage » est sélectionnée, D.F.O. charge automatiquement la dernière analyse effectuée/utilisée sur l'image.

Lorsque l'option « Demander les informations manquantes sur le patient au démarrage » est sélectionnée, D.F.O. demande automatiquement les informations manquantes lors du chargement de l'image.

Valeur de calibrage par défaut

Cette fonction vous permet de calibrer chaque image chargée avec une valeur par défaut.


Cette valeur par défaut peut être modifiée en indiquant simplement la valeur DPI ou Pixels/M correcte.

Remarque : Les modifications peuvent être enregistrées en cliquant sur le bouton Sauvegarder.

Si les modifications ne sont pas sauvegardées, elles ne seront pas mémorisées lors du redémarrage du D.F.O.

4.16 Éditeur de points de repère

Éditeur de points de repère

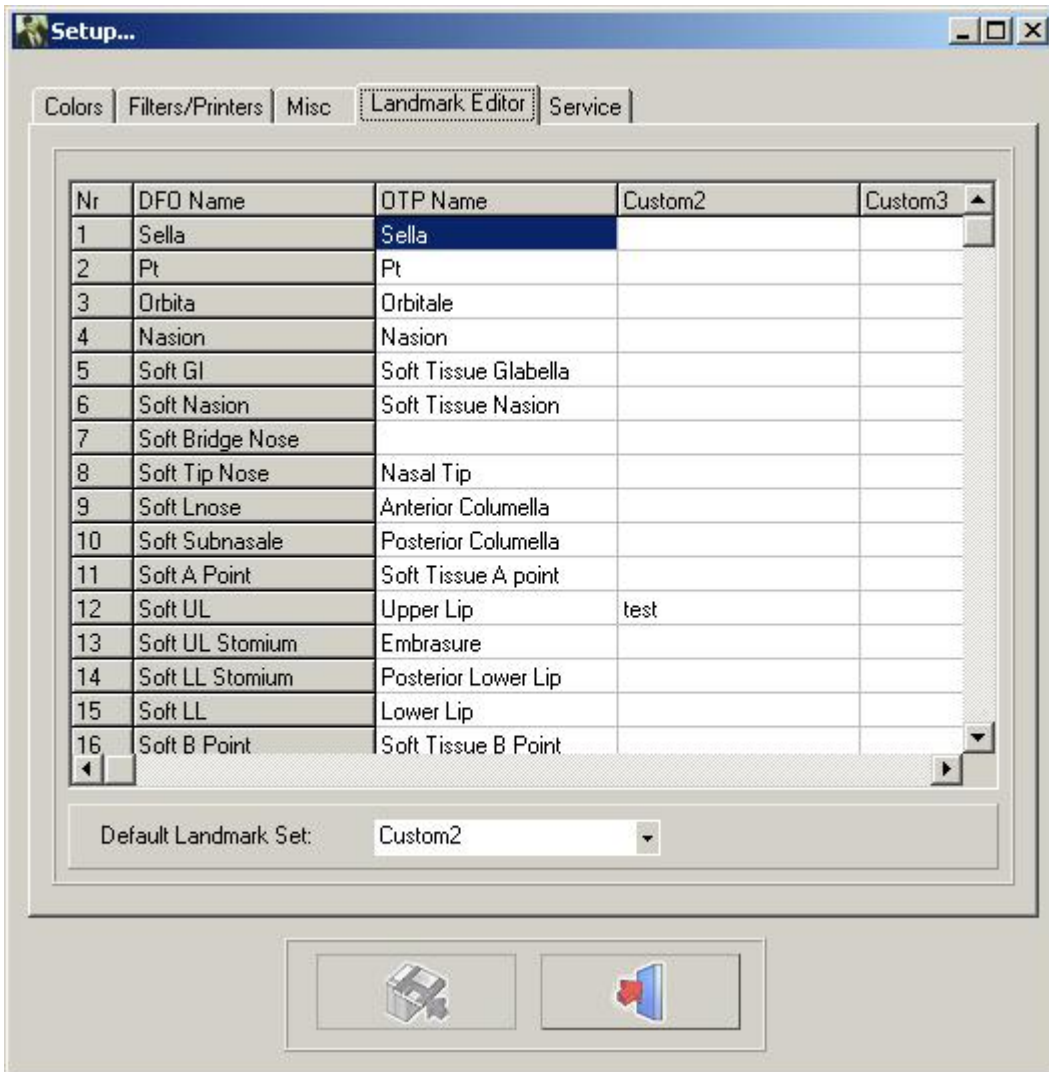

Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier les noms des points de repère utilisés dans l'onglet « Tracé ».

Il existe 4 colonnes différentes.

La première colonne « Nom D.F.O. » ne peut pas être modifiée.

La deuxième colonne « Nom OTP » vous indique les noms des points de repère tels qu'ils sont utilisés dans le programme OTP.

Les troisième et quatrième colonnes peuvent être remplies avec vos propres noms de repères personnels.

Vous pouvez sélectionner votre colonne préférée en cliquant sur la petite flèche dans la fenêtre « ensemble de repères par défaut », puis choisir le nom de votre colonne préférée.

Il n'est pas nécessaire de remplir toute la colonne.

Pour chaque point de repère qui n'est pas rempli, D.F.O. affichera le « nom D.F.O. ».


4.17 Entretien

Entretien

Cet onglet ne peut être utilisé que pour un entretien autorisé.

4.18 Affichage

Aperçu

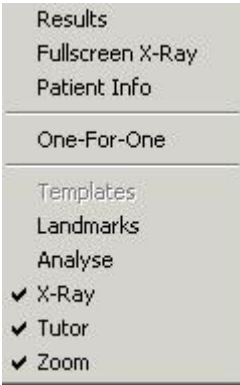

Résultats (Section 4.30)

Radiographie en plein écran Cette fonction vous montre l'aperçu avant impression de la radiographie en format « Ajusté à la page » (plein écran).

Information patient (Section 4.33)

Un pour un: Un « pixel » pour un « pixel »

La radiographie sera affichée de manière à ce que chaque pixel à l'écran représente exactement un pixel capturé.

Modèles

Points de repère : Cette fonction permet de suivre tous les points de repère avec leur nom D.F.O..

Analyse (Section 4.28)

Rayons X (Section 4.27)

Tuteur (Section 4.29)


Loupe (Section 4.36) Cette fonction activera la « loupe »

4.19 Aide


Aide


À propos de

Enregistrement

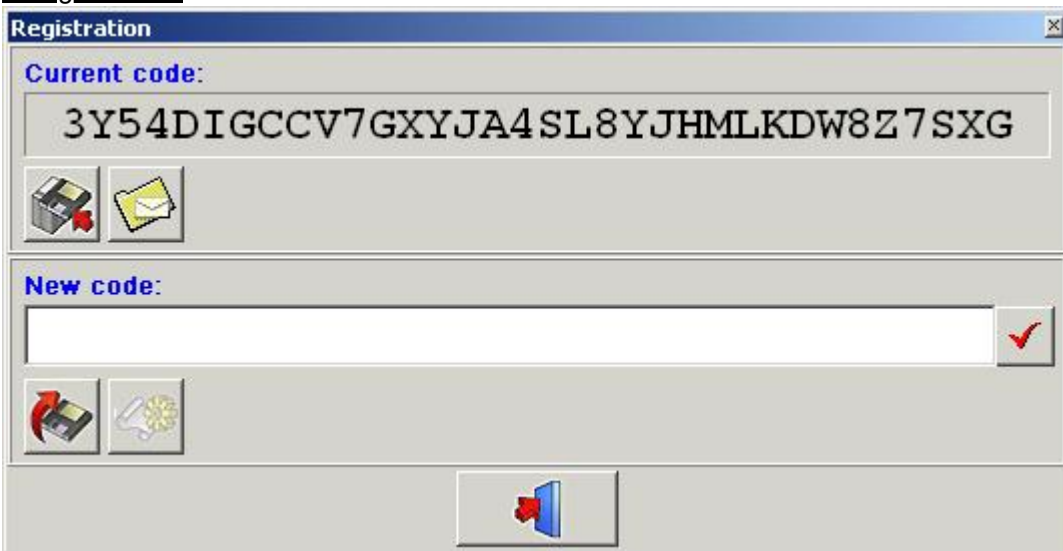

Code actuel : le code généré actuel.

Appuyez sur  pour copier ce code sur une disquette.

Appuyez sur  pour envoyer ce code par e-mail.

Cette fonction vous permet de reprogrammer la clé matérielle.

Cette étape peut être obligatoire si vous avez besoin de modules supplémentaires comme l'éditeur d'analyse. Le « **code actuel** » peut être envoyé par courrier électronique à ImageLevel directement. Après vérification, le « **nouveau code** » vous sera envoyé. Collez le code dans la fenêtre « Nouveau code ». Appuyez sur l'**icône** « V » pour vérifier la clé et reprogrammer votre clé matérielle.

4.20 Enregistrement

Enregistrement (Section 4.19)



Cette fonction vous permet de reprogrammer la clé matérielle.

Cette étape peut être obligatoire si vous avez besoin de modules supplémentaires comme l'éditeur d'analyse. Le « **code actuel** » peut être envoyé par courrier électronique à ImageLevel directement. Après vérification, le « **nouveau code** » vous sera envoyé. Collez le code dans la fenêtre « Nouveau code ». Appuyez sur l'**icône** « V » pour vérifier la clé et reprogrammer votre clé matérielle.

4.21 Fenêtre de contrôle


Fenêtre de contrôle

La fenêtre de contrôle comporte 4 onglets :

- Tracé (Section 4.22)
- Modification (Section 4.24)
- Orientation (Section 4.23)
- Superposition (Section 4.25)

4.22 Tracé

Tracé

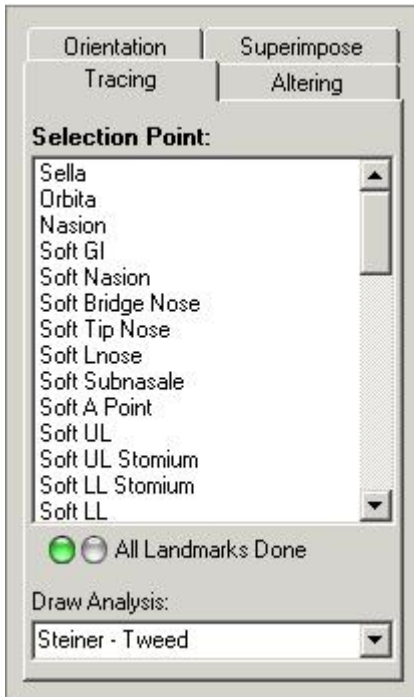

En haut de l'onglet Tracé, vous verrez une *fenêtre du point de sélection*.

Dans cette fenêtre, tous les points nécessaires aux analyses sélectionnées (menu analyses) sont indiqués.

D.F.O vous demande de poser les repères manquants en les marquant, un par un, en bleu.

Lorsque vous souhaitez définir un point différent du point marqué, vous pouvez sélectionner ce point en cliquant sur son nom.

Chaque point sélectionné est affiché dans la fenêtre du Tuteur (plus tard).


Les points peuvent être définis en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le point correspondant sur la radiographie.

Lorsqu'un point est défini, D.F.O. dessine immédiatement les modèles.

Lorsque tous les points nécessaires aux analyses sélectionnées sont définis, D.F.O. dessinera l'analyse choisie. (voir menu : options : configuration)

Lorsque vous voulez tirer une autre analyse de votre sélection, vous pouvez choisir l'analyse dans la fenêtre « tirer l'analyse pour : ».

En cliquant sur la petite flèche à droite de la fenêtre, votre sélection s'affiche dans une petite fenêtre pop-up.

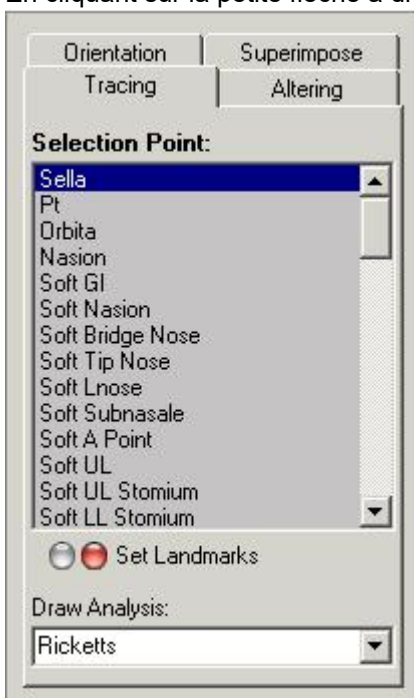


Dans cette fenêtre pop-up, vous pouvez choisir l'analyse que vous voulez dessiner.
Lorsque vous cliquez sur l'analyse que vous avez choisie, D.F.O. dessine immédiatement l'analyse.

4.23 Orientation

Orientation

En cliquant sur l'onglet Orientation, l'onglet suivant apparaît.

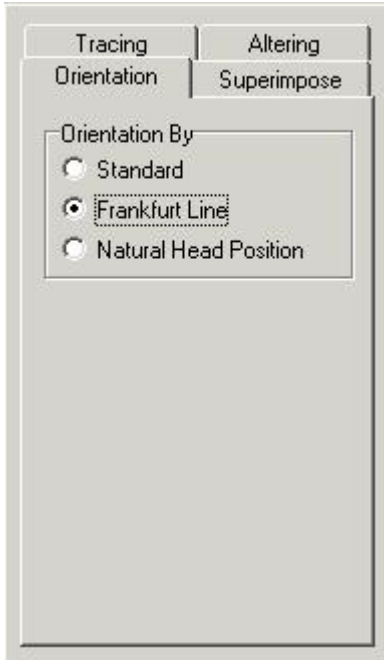

Cette fonction vous permet de modifier l'orientation de l'image.

Standard :

L'orientation standard montre l'image telle qu'elle a été capturée. (Si le patient est correctement positionné, l'image sera orientée sur le plan horizontal de Francfort.)

(Défaut)

Plan horizontal de Francfort :

En sélectionnant « plan horizontal de Francfort », l'image sera orientée de telle sorte que la ligne de Francfort apparaisse horizontalement à l'écran.

Position naturelle de la tête :

Si la « position naturelle de la tête » est sélectionnée, l'image sera orientée de manière à ce que la ligne de Francfort apparaisse avec une déviation de 8° par rapport à l'horizontale.


Remarque :

L'orientation ne peut être modifiée que si les points (Porion, Orbita) nécessaires à la ligne de Francfort sont fixés.

4.24 Modification

Modification

En cliquant sur l'onglet de modification, vous obtenez l'onglet suivant.

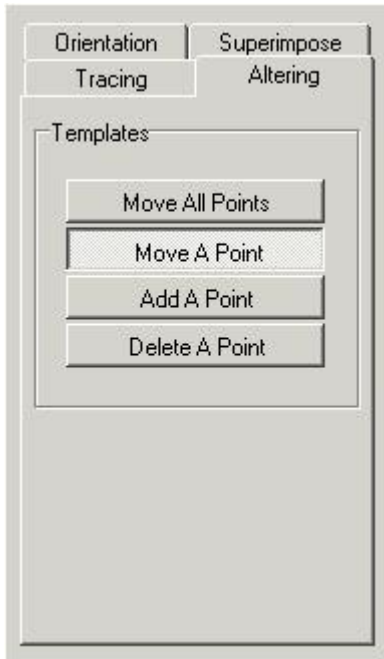

Cet onglet comporte 4 fonctions différentes permettant de modifier les modèles dessinés.

- Déplacer tous les points
- Déplacer un point
- Ajouter un point
- Supprimer un point

Lorsque l'onglet est activé, tous les modèles sont marqués par des points.

ex. sella



Ces points peuvent être modifiés.

Déplacer tous les points :

Cette fonction vous permet de déplacer complètement le modèle.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'un des points, maintenez le bouton enfoncé et déplacez le modèle avec la souris. Lorsque le modèle est au bon endroit, lâchez le bouton (glissez-déposez).

Déplacer un point

Cette fonction vous permet de déplacer un point du modèle.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le point, maintenez le bouton enfoncé et déplacez le point avec la souris. Lorsque le point est au bon endroit, relâchez le bouton (glissez-déposez).

Ajouter un point

Lorsque le modèle ne peut pas être optimisé correctement avec les points de marquage de D.F.O., de nouveaux points peuvent être ajoutés sur le modèle.

Lorsque vous déplacez le curseur sur le modèle, un cercle de marquage apparaît.

Vous pouvez ajouter un point à cet endroit en cliquant simplement avec le bouton gauche de la souris.

Ce point peut alors être déplacé au bon endroit.

Supprimer un point

Lorsque cette fonction est sélectionnée, vous pouvez supprimer chaque point, un par un.

Lorsque vous déplacez le curseur sur le modèle, un cercle de marquage apparaît.

Vous pouvez supprimer un point sélectionné en cliquant simplement avec le bouton gauche de la souris.

Le modèle sera automatiquement ajusté.

4.25 Superposition


Superposition



Cette fonction vous permet d'afficher plusieurs tracés les uns sur les autres. Ces tracés doivent être réalisés sur le même patient, mais peuvent être réalisés sur différentes radiographies céphaliques (Céphalo). Grâce à cette fonction, il devient facile de comparer les tracés avant, après et pendant le traitement. Les tracés peuvent être chargés en cliquant sur le bouton de chargement.



La fenêtre suivante apparaît :

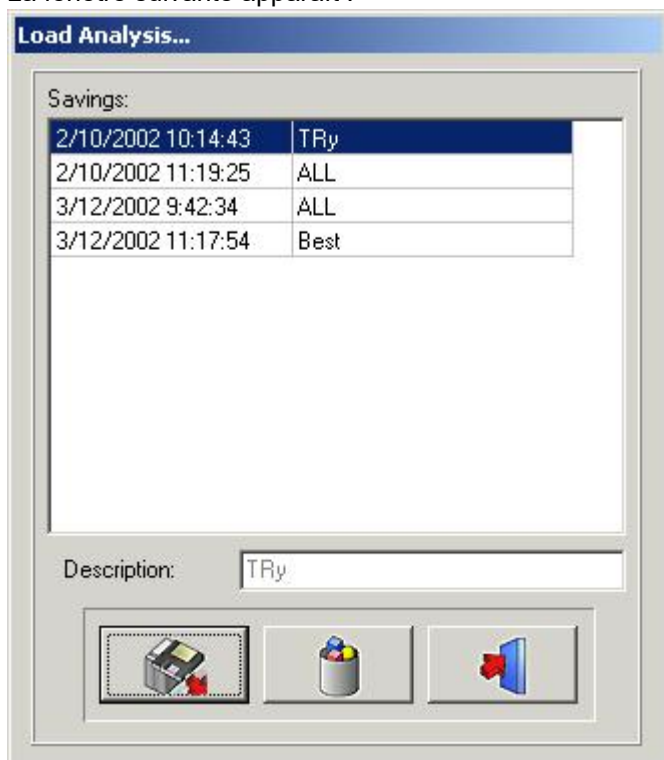

En cliquant sur le nom sélectionné puis sur l'icône Charger, ou en double-cliquant sur le nom sélectionné, l'analyse choisie sera chargée.

Le nombre de tracés qui peuvent être superposés est illimité.

Chaque tracé apparaîtra dans une couleur différente, jusqu'à un maximum de six (6) couleurs, chacune faisant référence à la barre de titre colorée en haut de l'écran.

Les tracés peuvent être superposés le long de ces références prédéfinies.

Porion-Orbita

Sella-Nasion

ANS-PNS à ANS

Basion-Nasion

Gonion-Menthon à Menthon

Nasion-Basion à Nasion

Les tracés superposés peuvent être imprimés, en cliquant simplement sur l'icône Imprimer.

4.26 Icônes

Icônes



Montrer Rayons X (Section 4.27)

Montrer Analyse (Section 4.28)

Montrer Tuteur (Section 4.29)

Montrer Résultats (Section 4.30)

Plus nette (Section 4.31)

Lisser (Section 4.32)

Calibrer (Section 4.9)

Recharger Rayons X (Section 4.34)

Effacer l'analyse (Section 4.3)

Charger l'analyse (Section 4.4)

Sauvegarder l'analyse (Section 4.5)

Quitter le programme (Section 4.35)

4.27 Montrer Rayons X

Montrer Rayons X



En cliquant sur cette icône, la radiographie chargée sera supprimée du bureau.

La loupe devient blanche.

Cette fonction ne supprime pas les points de repère, les modèles ou l'analyse du bureau.

L'icône « Supprimer les rayons X » peut être utilisée en combinaison avec d'autres fonctions (« Afficher l'analyse », « Afficher les résultats »...).

Lorsque vous cliquez une seconde fois sur l'icône, la radiographie réapparaît à l'écran.

4.28 Montrer Analyse

Montrer Analyse



Cette fonction vous permet de voir l'analyse sélectionnée sur votre bureau.

L'analyse ne peut être affichée que lorsque tous les points nécessaires aux analyses activées sont définis.

Cette fonction peut être utilisée en combinaison avec d'autres fonctions (« Supprimer les rayons X », « Afficher

les résultats »...).

Lorsque vous cliquez une seconde fois sur l'icône, l'analyse réapparaît à l'écran.

4.29 Montrer Tuteur

Montrer Tuteur



En cliquant sur cette icône, vous activez la fonction Tuteur.

Lorsque vous cliquez une seconde fois sur l'icône, le « Tuteur » réapparaît à l'écran.

4.30 Montrer Résultats

Montrer Résultats



En cliquant sur cette icône, D.F.O. vous montrera les résultats sur un rapport d'analyse.

Ce rapport vous permet de comparer les valeurs avec le tracé (plus tard).

4.31 Plus nette

Plus nette



En cliquant sur cette icône, vous affinerez l'image active.

L'option Plus nette permet d'améliorer les bords des objets de l'image.

La pondération Plus nette peut être réglée dans l'écran Configuration (onglet Paramètres fonctionnels).


La fonction Plus nette peut être répétée successivement sur la même image.

La fonction Plus nette introduira du bruit dans l'image, si elle est utilisée de manière incorrecte (trop importante).

Dans ce cas, une réduction du bruit doit être appliquée.

Paramètres pour **PLUS NETTE:OPTIONS (Section 4.8)-CONFIGURATION (Section 4.12)-
FILTRES/IMPRIMANTES (Section 4.14)**

Modifiez la valeur dans Filtrés - Plus nette

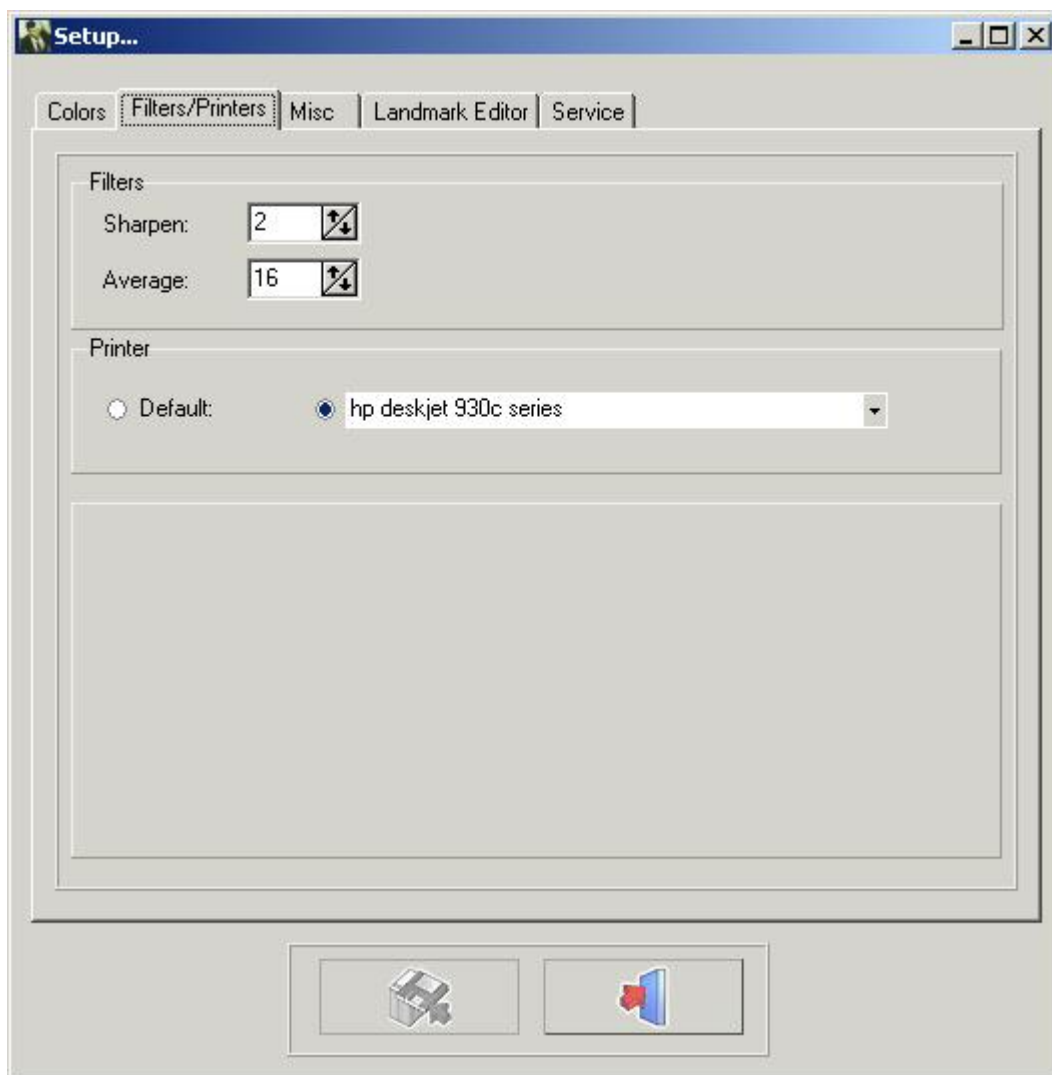

Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer les paramètres avant de quitter.

4.32 Réduction du bruit


Réduction du bruit



En cliquant sur cette icône, vous réduirez le bruit de l'image sélectionnée.

La fonction de réduction du bruit peut être répétée sur la même image.


Réglages pour la réduction du bruit : Menu Options - Configuration - Filtres/Imprimantes : LISSER

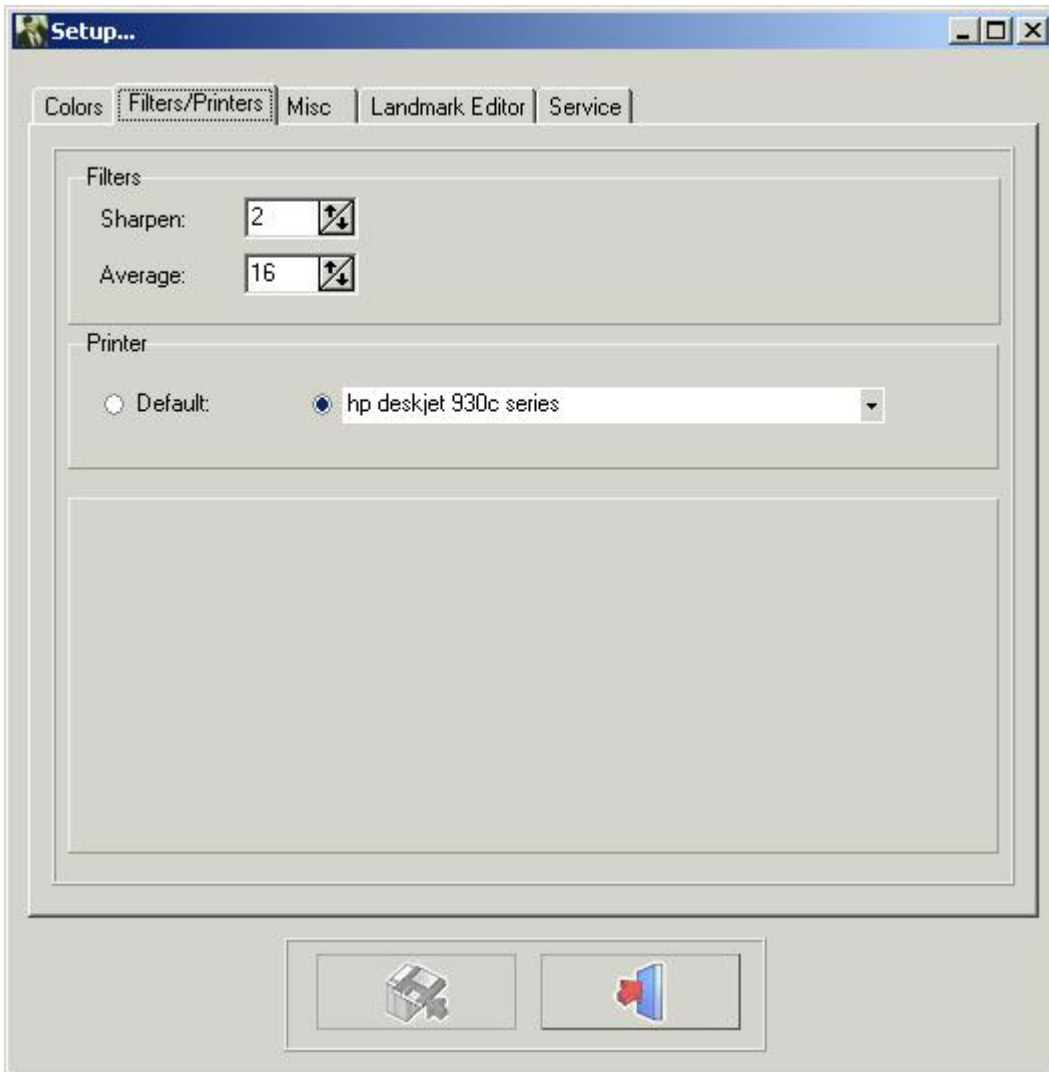

Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer les paramètres avant de quitter.

4.33 Information patient

Information patient

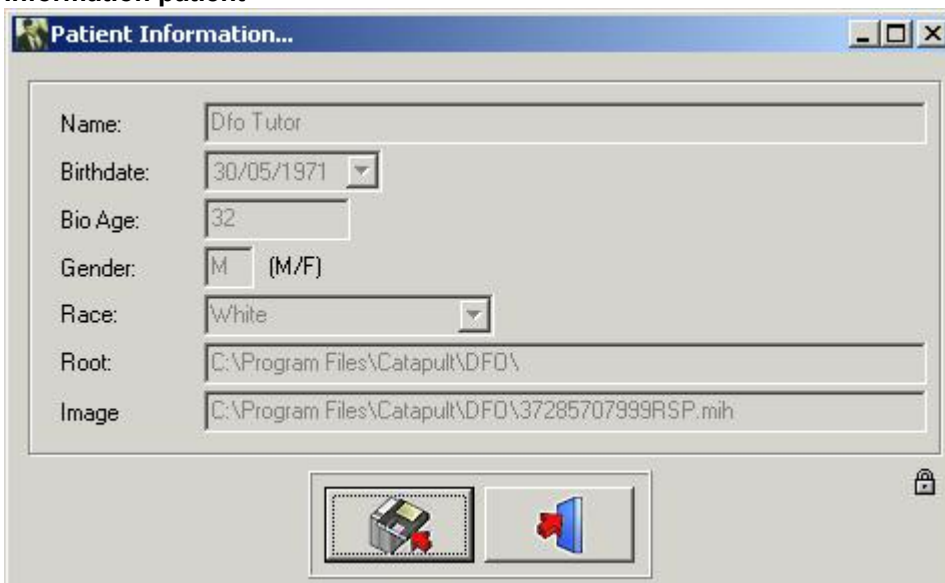

Chaque élément des informations sur le patient, qui n'est pas pris en charge par le front-end, est coloré en blanc. Ces informations manquantes sur le patient peuvent être complétées.

Pour des cas particuliers, il est possible d'écraser les informations du front-end.

En cliquant sur le petit cadenas, vous activerez tous les champs.

Ces champs peuvent ensuite être ajustés.

Avertissement :Lorsque le patient est rechargé, les champs activés peuvent être écrasés par le front-end.

4.34 Recharger Rayons X

Recharger Rayons X



En cliquant sur cette icône, vous rechargerez l'image originale à partir de la bibliothèque des images.

Tous les anciens post-traitements sur l'image active seront réinitialisés. (Luminosité, contraste, pseudo-couleurs...).

4.35 Quitter le programme

Quitter le programme



Quitter le programme

Le programme retournera à Mediadent, ou à votre logiciel de gestion de cabinet.

Vous ne pouvez pas fermer D.F.O. séparément !!

D.F.O. se ferme automatiquement lorsque Mediadent est fermé.

4.36 Loupe

Loupe



Laloupe vous permet de définir les points de repère avec précision.

C'est possible, grâce à la superbe capacité de zoom et aux cinq filtres spéciaux.

Chaque mouvement du curseur sur l'image chargée sera affiché en « temps réel » dans *laloupe*.

Vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière, en utilisant simplement la molette de la souris.

Dans *laloupe*, le curseur est représenté par une croix.

Tant que les pixels de la loupe représentent plus d'un pixel de l'image capturée, la croix est colorée en bleu.

La croix se transforme en une ligne inversée très fine à partir du moment où l'image est affichée dans un format « Un pour un ».

Au bas de *laloupe* figurent 5 boutons différents (filtres).

1. Aucun
2. Inverser
3. Pleins feux
4. Relief
5. Correction de gamme

Vous pouvez passer d'un filtre à l'autre à tout moment avec la flèche de la souris ou avec les touches fléchées gauche ou droite.

Les filtres Relief et Correction de gamme peuvent être ajustés à l'aide des touches fléchées haut et bas du clavier.


4.37 Fenêtre Tuteur

Fenêtre Tuteur

Le Tuteur est une fonction spécialement conçue dans D.F.O pour vous aider à poser les repères.

La *Fenêtre Tuteur* peut être activée en cliquant sur l'icône « Afficher le tuteur » ou dans le menu d'affichage.

Pour chaque point sélectionné dans l'onglet « Tracé », le tuteur vous montre une image Tuteur sur laquelle le point de repère sélectionné est pointé.

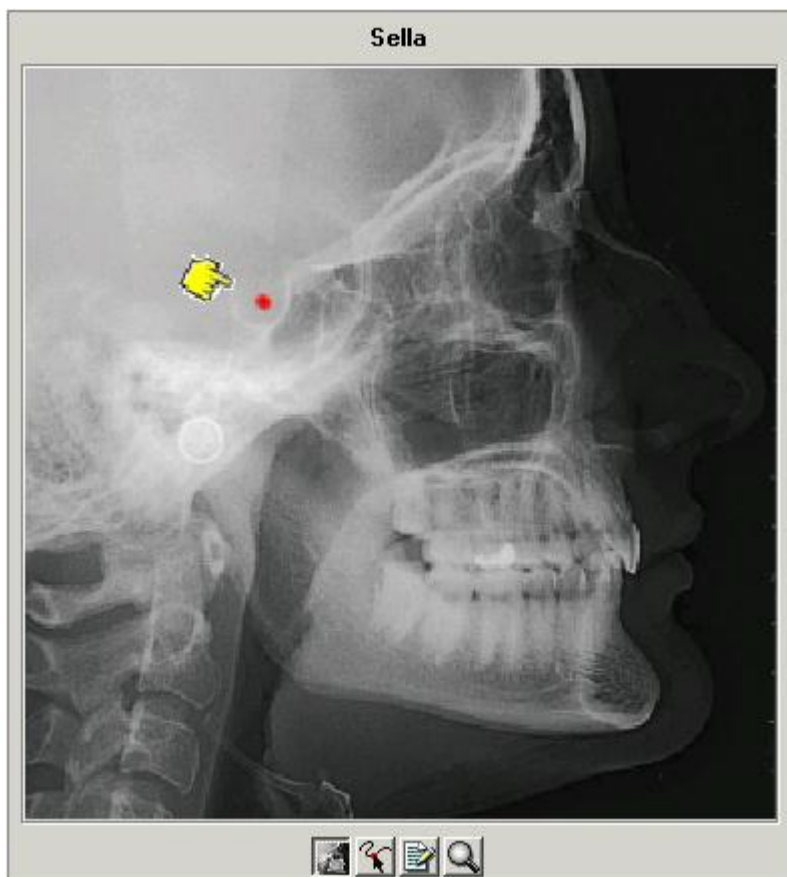


4 boutons se trouvent en bas de la fenêtre.

1. *Rayons X*
2. *Dessin*
3. *Explication*
4. *Loupe*

Si le bouton *Rayons X* est sélectionné, l'image du tuteur sera une radiographie.

Si le deuxième bouton « *dessin* » est sélectionné, l'image du tuteur sera un dessin.

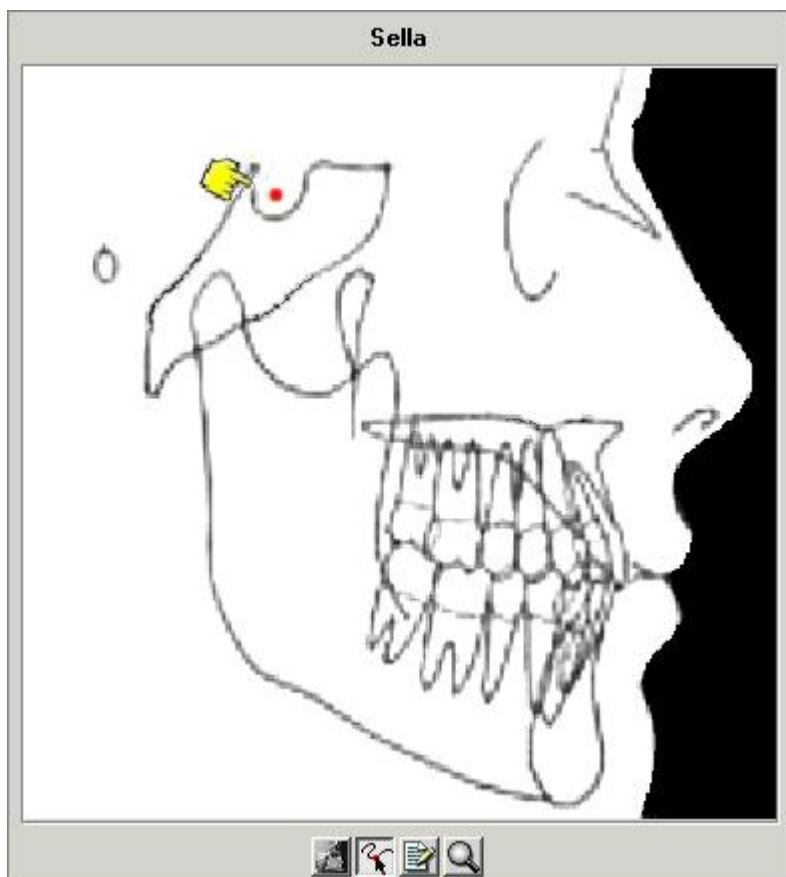

Si vous avez besoin d'une image plus détaillée, vous pouvez combiner les boutons *Rayons X* *Dessin* avec le bouton *loupe*(4).



Le bouton *Explication* (3) vous donne une définition de chaque repère.

Voir [REPERES.doc](#)

4.38 Barre d'outils

Barre d'outils



Luminosité (Section 4.39)

Contraste (Section 4.40)

Pseudo-Couleurs (Section 4.41)

Fenêtrage (Section 4.42)

4.39 Luminosité

Luminosité



Pour modifier la luminosité de l'image activée, cliquez sur le curseur avec le bouton gauche de la souris, maintenez-le et déplacez-le, jusqu'à obtenir le réglage souhaité.

En cliquant sur l'icône, la luminosité sera automatiquement réinitialisée.

4.40 Contraste

Contraste



Pour modifier le contraste de l'image activée, cliquez sur le curseur avec le bouton gauche de la souris, maintenez-le et déplacez-le, jusqu'à obtenir le réglage souhaité.

En cliquant sur l'icône, le contraste sera automatiquement réinitialisé.

4.41 Pseudo-Couleurs

Pseudo-Couleurs



Cette fonction vous permet de représenter toutes les échelles de gris de l'image active, avec une véritable couleur de la palette de couleurs.

Cette fonction est souvent utilisée pour tracer les tissus mous.

Pour modifier les Pseudo-Couleurs de l'image activée, cliquez sur le curseur avec le bouton gauche de la souris, maintenez-le et déplacez-le, jusqu'à obtenir le réglage souhaité.

En cliquant sur l'icône, les Pseudo-Couleurs seront automatiquement réinitialisées.

4.42 Fenêtrage

Fenêtrage



Cette fonction est l'une des plus puissantes et des plus utilisées du paquet Mediadent. Elle vous permet de réduire (limiter) le nombre de niveaux de gris sur votre écran actif. Effectuez les étapes suivantes :



Pointez le bout de votre souris vers l'extrémité de la barre de la fenêtre.

- Une flèche à double pointe apparaît
- Appuyez sur le bouton gauche de la souris
- Maintenez-le enfoncé pendant deux secondes, sans le déplacer
- Un sablier apparaîtra immédiatement, puis il se transformera en flèche
- Vous êtes maintenant prêt à déplacer la limite de la barre de fenêtre (maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé)
- L'image sera ajustée en temps réel
- Vous pouvez arrêter, lorsque le résultat souhaité est atteint, en relâchant simplement le bouton gauche de la souris.

Vous pouvez également déplacer la gamme de niveaux de gris sélectionnée le long de la fenêtre.

- Pointez le bout de votre souris sur la partie grise de la fenêtre
- Une « main » apparaîtra
- En appuyant sur le bouton gauche de la souris, cette partie peut être déplacée sur la longueur totale de la fenêtre.
- L'image réagit en temps réel.
- Arrêtez, en relâchant le bouton de la souris.






Vous pouvez combiner le fenêtrage, avec les outils de contraste et de luminosité.

Dans tous les cas, les outils de contraste et de luminosité ne seront actifs que dans la partie grise de la fenêtre.

5 Identification


 Corilus SA/NV
 Gaston Crommenlaan
 4 bus 26
 9050 Gand, Belgique
 Tél : +32 3 755 76 66
 Fax : +32 3 755 76 22
info@imagelevel.com
www.imagelevel.com

| | |
|---|---|
|  | Mediadent est un dispositif médical enregistré. |
|  | Les modules Mediadent suivants, qui ont un but médical dans Mediadent, sont couverts par le marquage CE : Configuration originale, Fenêtre, Optimisation, Calibrage, Mesures, Visionneuse 3D et DFO. |
|  | Le manuel d'utilisation (mode d'emploi) est fourni en format électronique. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation dans la section Aide du logiciel Mediadent, via le menu Aide ou en appuyant sur la touche de raccourci « F1 ». Vous pouvez également télécharger une copie PDF via www.imagelevel.com ou demander une copie imprimée gratuite en contactant notre service clientèle. Les manuels papier seront livrés au plus tard dans les 7 jours. |

Date d'émission des (e)IFU : 2023-11-30

Numéro de révision des (e)IFU : 2

Version du logiciel applicable : v8.23.11.1.4.*